


INFORMATION

Anwendung, Bedienung & Therapiemöglichkeiten

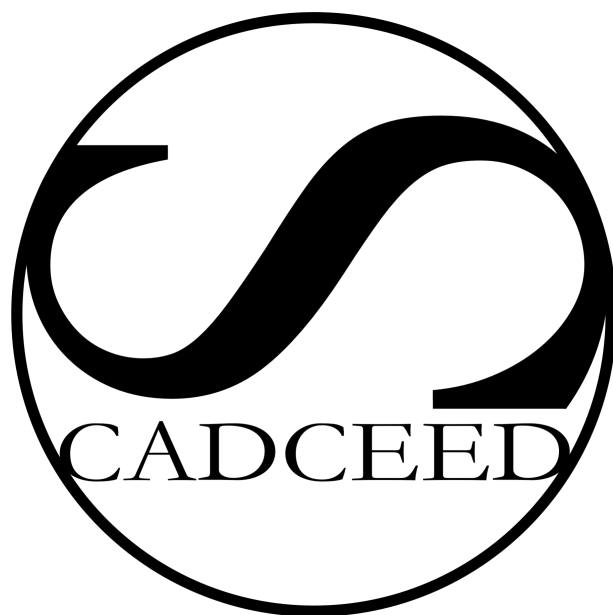

FÜHLE DIE KRAFT DER SONNE

CADCEED
EDELSTEINMATTE




Vielen Dank, dass Sie sich für die CADCEED EDELSTEINMATTE entschieden haben.

Um die Edelsteinmatte optimal zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Anleitung richtig durch.

INHALTSVERZEICHNIS

<u>BEDIENUNGSANLEITUNG DER STEUEREINHEIT</u>	<u>1</u>
<u>TEMPERATUREN & NUTZUNGSDAUER DER INFRAROTWÄRME</u>	<u>2</u>
<u>MAGNETFELD THERAPIE – PROGRAMMAUSWAHL</u>	<u>3</u>
<u>TENS – FUNKTION</u>	<u>4</u>
<u>DIE EDELSTEINE DER MATTE & IHRE WIRKUNG</u>	<u>5</u>
<u>AUFBAU DER CADCEED EDELSTEINMATTE</u>	<u>6</u>
<u>THERAPIEMÖGLICHKEITEN DER CADCEED EDELSTEINMATTE</u>	<u>7</u>
<u>NEGATIV IONEN THERAPIE</u>	<u>8</u>
<u>PHOTON – ROTLICHT – THERAPIE</u>	<u>8</u>
<u>WÄRMETHERAPIE MIT FERNINFRAROTSTRAHLEN</u>	<u>9</u>
<u>WÄRMETHERAPIE ALLGEMEIN</u>	<u>9</u>
<u>INFRAROT – THERAPIE – BALSAM FÜR DEN KÖRPER</u>	<u>9</u>
<u>MAGNETFELD THERAPIE / BIO MAGNETISCHE RESONANZ THERAPIE</u>	<u>10</u>
<u>STÖRUNG DER NATÜRLICHEN BIORESONANZFELDER</u>	<u>10</u>
<u>BRINGE KÖRPER, SEELE UND GEIST INS GLEICHGEWICHT</u>	<u>10</u>
<u>SCHUMANN RESONANZ</u>	<u>10</u>
<u>EDELSTEIN / HEILSTEIN-THERAPIE</u>	<u>11</u>
<u>INBETRIEBNAHME / STROMANSCHLUSS</u>	<u>12</u>
<u>PLEGEANLEITUNG</u>	<u>12</u>
<u>BENUTZUNG & SCHUTZ DER MATTE</u>	<u>12</u>
<u>TIERE IM HAUSHALT</u>	<u>12</u>
<u>PFLEGE DER EDELSTEINE</u>	<u>13</u>
<u>TIPP ZUR RAUMREINIGUNG</u>	<u>13</u>
<u>INFORMATIONEN</u>	<u>14</u>
<u>LIEFERUMFANG</u>	<u>14</u>
<u>TECHNISCHE DATEN</u>	<u>14</u>
<u>LINKS</u>	<u>14</u>

BEDIENUNGSANLEITUNG DER STEUEREINHEIT

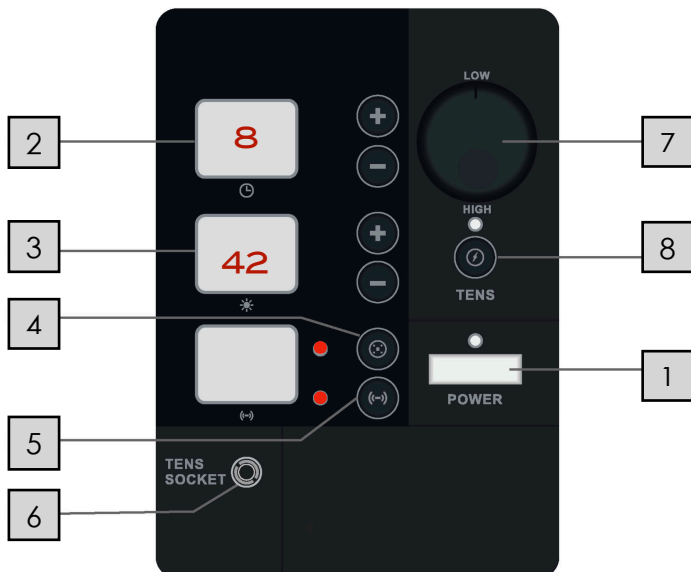

1

Ein- und Ausschalten:

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das System einzuschalten und abzuschalten.

Das System eliminiert automatisch schädliche EMF (elektromagnetische Wellen)

2

Zeitanzeige / Zeiteinstellung: Zeit plus +, Zeit minus - :

Die Zeiteinstellung erfolgt über volle Stunden, 1 bis 12 Stunden.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die **komplette Matte** automatisch ab.

3

Temperaturanzeige / Einstellung: Temp. plus +, Temp. minus -:

Einstellung stufenlos von 30 C° – 70°C / 50 – 158°F

Abschalten der Heizfunktion: Drücken Sie + und - gleichzeitig

Drücken Sie ein beliebiges + oder - , um die Heizung einzuschalten.

Bitte geben Sie der Matte Zeit, sich aufzuheizen. z.B.: ca. 45 min bis 60C° , ca. 30 min bis 56 C°

4

Photonen – Therapie (Rotes Licht auf der Matte) Ein/Aus:

Die Einstellung arbeitet für 120 Minuten und schaltet sich danach automatisch aus.

(Rote Lämpchen auf der CADCEED Edelsteinmatte gehen an /aus)

5

Magnetfeld –Therapie Anzeige & –Ein/Aus & Programmeinstellung

Die Programme laufen jeweils 30 Minuten und schalten sich dann automatisch ab.

Drücken Sie mehrmals, um ein Programm auszuwählen. Das gewählte Programm wird automatisch nach 3 Sekunden bestätigt und das Lämpchen blinkt in der gewählten Frequenz.

Danach wird an dieser Stelle die Frequenz in HZ (Herz) angezeigt. (z.B.: bei P2 = 8)

6

TENS – Buchse: hier bitte den Stecker der TENS-PADS einstecken. Erst einschalten, wenn die TENS-PADS zur Benutzung bereit sind

7

TENS – Stärke-Einstellung: stufenlos, von niedrig bis hoch. (Bitte sanft anfangen!)

8

TENS On/Off: Arbeitet für maximal 45 Minuten und schaltet danach automatisch aus.

Speicherfunktion: Die letzte Einstellung wird automatisch gespeichert. (Temperatur, Zeit und PEMF-Programm). Ziehen Sie den Netzstecker, wird der Speicher gelöscht.

TEMPERATUREN & NUTZUNGSDAUER DER INFRAROTWÄRME

Geeignete Anwendungsdauer von 1 bis zu 8 Stunden. Die Edelsteinmatte kann auch über Nacht verwendet werden. In diesem Fall sollte die Temperatur 40°C nicht übersteigen.

Achten Sie bitte immer auf Ihr Wohlfühlgefühl und tasten Sie sich langsam an die favorisierte Wärme heran. Denken Sie daran, genug zu trinken. Nur so kann Ihr Stoffwechsel optimal funktionieren und Giftstoffe abtransportieren.

WÄRMEANWENDUNGEN

35°C – 40°C – Sanfteste Anwendung, vor allem für längere Anwendungen, auch über Nacht

- allgemeine Unterstützung der Gesundheit
- ideale Temperatur bei Kopfschmerzen und Migräne
- immunstärkend, vitalisierend
- milde Entgiftung (für sensible Menschen)
- Stärkung der Regenerationsphase im Schlaf
- unterstützt Zellerneuerung
- vertieft den Schlaf —> kann bei Schlafstörungen helfen

55°C – 60°C – empfohlene Anwendungsdauer von 10 Minuten bis 90 Minuten

- Entlastung bei Stress, Angst und Trauma
- mögliche Gewichtsreduktion durch Auflösung von Fettzellen
- reduziert Muskel- und Gelenkschmerzen
- Regeneration nach körperlicher Anspannung
- stimmungsaufhellend
- stimuliert Libido und sexuelle Kraft
- tiefste Entspannung
- unterstützt Geweberegeneration
- unterstützt Regeneration nach Operationen

45°C – 50°C – Für eine Anwendungsdauer von 60 oder 120 Minuten und länger

- fördert Entspannung sowie Funktion des Nervensystems
- gleicht Blutdruck sowie den Blutzuckerspiegel aus
- kann Muskel-, Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen reduzieren
- stärkt die Herz-Kreislauf-Funktion
- unterstützt die Atmung (bei z.B. Asthma & Allergien)
- unterstützt Regulierung der Monatszyklen und Hormonbalance

65°C – 70°C – Intensivsitzen – empfohlene Anwendungsdauer von 10 bis maximal 60 Minuten

- Abwehr gegen akute Infektionen (viral, bakteriell und bei Übersäuerung)
- bei genereller Schwäche und Blockaden
- maximale Entgiftung aller Zellen und Gewebe
- maximale Stoffwechselanregung
- mögliche Gewichtsreduktion durch Auflösung von Fettzellen
- Anwendung entspricht Saunasitzung

! Bitte geben Sie der Matte Zeit um hoch zu heizen. Ab ca. 60 C° steigt die Temperatur nur noch sehr langsam an. Denken Sie daran, die Matte gibt permanent Wärme an den Raum ab. Sie können den Vorgang beschleunigen, indem Sie die Matte mit einer Decke zudecken oder sich schon bei 60 C° drauf legen. Das spart Energie und Zeit.

Decken Sie sich bitte, vor allem bei den höheren Temperaturen von oben zu, um die Infrarotwärme optimal zu nutzen. Legen Sie bei den hohen Temperaturen ein weiteres Handtuch drunter, auch die Steine werden heiß! Tasten Sie sich langsam ran. Trinken Sie genug! Achten Sie auf Ihren Kreislauf.

Zeiten zum Aufheizen : ca. 25–30 min bis 56 C° , ca. 45 min bis 60 C°

MAGNETFELD THERAPIE - PROGRAMMAUSWAHL

DIE 9 PROGRAMME DER CADCEED EDELSTEINMATTE

(dient der groben Orientierung)

P1 3 HZ (Deltawellen)

- verbessert den Tiefschlaf
- fördert die Entspannung
- fördert Intuition

P2 8HZ (7,83HZ) = Schumann Resonanz = ahmt die magnetische Energie der Erde genau nach

- ähnlich, wie sich barfuß zu erden / barfuß auf der Wiese laufen
- regt die Durchblutung an
- kann dadurch kann heilend wirken & Entzündungen senken
- Hormonhaushaltsregulation

P3 10 HZ (Alpha Wellen)

- reduziert Stress und innere Unruhe
- reduziert Angst und Depression
- fördert kreatives Denken

P4 25HZ (Beta Wellen)

- macht munter
- fördert Wachsamkeit
- bringt Energie
- Selbstvertrauen
- fördert das Vertrauen in Sportsiege

P5 40Hz (Gamma Wellen)

- verbessert das Gedächtnis & Erinnerungsvermögen
- verbessert Konzentration, Beherrschung der Lösung komplexer Situationen
- gut gegen Lernstörungen

P6 48HZ (Gamma Wellen) Level 1 (leicht)

- Heilung
- Durchblutung, Schmerzlinderung

P7 56HZ (Gamma Wellen) Level 2 (mittel)

- Heilung
- Durchblutung, Schmerzlinderung

P8 64HZ (Gamma Wellen) Level 3 (stark)

- Heilung
- Durchblutung, Schmerzlinderung
- Körperliche Stärke

P9 MIX

- alle Programme 1–8 im Intervall

TENS - FUNKTION

TENS = eine sichere Alternative zu schmerzstillenden Medikamenten

Was ist TENS?

Die transkutane elektrische Nervenstimulationstherapie (**TENS**) ist eine klinisch erprobte, einfach anzuwendende, sichere Alternative zu schmerzstillenden Medikamenten und wird von Ärzten auf der ganzen Welt häufig verschrieben. TENS kann sowohl zur Linderung akuter als auch chronischer Schmerzen eingesetzt werden und hat sich in den letzten Jahren in der Behandlung letzterer (insbesondere chronischer Rückenschmerzen) am meisten durchgesetzt. Als Therapieform ist sie für die meisten Patienten geeignet und besonders sinnvoll in Situationen, in denen eine Empfindlichkeit gegenüber Analgetika besteht.

Wie funktioniert es?

TENS sendet feste, angenehme elektrische Impulse, die über Klebepads an die Haut abgegeben werden.

Wie benutzt man das TENS-Pad?

1. Verbinden Sie das Kabel des TENS mit dem TENS-Pulspad.
2. Stecken Sie das Kabel in die TENS-Buchse.
3. Kleben Sie das Pulspolster auf den Körper.
4. Drücken Sie die TENS-Taste (**vergewissern Sie sich vorher, dass das TENS-Rad auf Position „LOW“ steht**).
5. Drehen Sie das TENS-Rad langsam von niedrig nach hoch, um die gewünschte Stärke auszuwählen.

Was ist Schmerzkontrolle?

TENS stimuliert sanft Ihre sensorischen Nerven, um das Schmerzsignal an das Gehirn zu unterdrücken, indem es ein angenehmes „Kribbeln“ vermittelt. Dieses Gefühl maskiert den Schmerz und bietet eine sofortige Schmerzlinderung. Die Schmerzlinderung hält normalerweise so lange an, wie die Stimulation abgegeben wird, mit einem kleinen Übertragungseffekt. Diese Art der Schmerzlinderung eignet sich am besten für scharfe, starke akute Schmerzen.

Hinweis:

Platzieren Sie die Tens-Pads mindestens 2,5 cm voneinander entfernt auf sauberer, trockener und gesunder Haut.

Verwenden Sie es **NICHT**: auf Kopf, Gesicht, Hals, Hals oder in der Nähe Ihres Herzens, mit einem implantierten oder angeschlossenen elektronischen medizinischen Gerät, bei Kindern oder auf ungesunder oder geschädigter Haut!

DIE EDELSTEINE DER MATTE & IHRE WIRKUNG

Die **CADCEED EDELSTEINMATTE** trägt mit den eingearbeiteten Heilsteinen dazu bei, die **Chakren auszubalancieren** und den **Energiefluss zu erhöhen**.

Die CADCEED EDELSTEINMATTE enthält folgende Edelsteine:

Amethyst, Sodalith, blauer Chalcedon, grünes Aventurin, gelbes Aventurin, Carneol, Roter Jaspis & Bian Steine.

Sie sind jeweils den Chakren zugeordnet.


- Der **Amethyst** wirkt auf das Kronenchakra, hat reinigende, klärende Eigenschaften für den Geist und regt die Vorstellungskraft an.
- Das Stirnchakra wird durch den **Sodalith** gestärkt, der Ängste und Blockaden können gelöst werden, er fördert Kreativität & Intuition.
- Der **hellblaue Chalcedon** richtet sich an das Halschakra und fördert unter anderem die Rhetorik und Selbstvertrauen.
- **Grüner Aventurin** ist mit dem Herzchakra assoziiert und schenkt Optimismus, Mut, inneres Gleichgewicht und Humor.
- Auf das Solarplexus-Chakra wirkt **Gelber Aventurin** ermutigend. hilft bei der Entscheidungsfindung, fördert Empathie und Mitgefühl, stärkt das Selbstwertgefühl, unterstützt bei Manifestationen
- **Carneol** ist dem Sakralchakra zugeordnet. Es fördert die Zellregeneration, kräftigt das Immunsystem und lindert Hautprobleme, wirkt kreislaufstabilisierend und stärkt die Herzmuskulatur.
- **Roter Jaspis** ist mit dem ersten Chakra, dem Wurzelchakra, verbunden und bringt innere Harmonie und Zuversicht.
- **Bian Steine** (zwischendrin)
enthalten bis zu 40 Spurenelemente, die die Regeneration der Haut fördern, innere Entzündungen lindern können und über Anti-Aging- Eigenschaften verfügen.
Die Wärmeleitfähigkeit des Bian Steins unterstützt außerdem bei der Ausleitung von Giften im Körper. Dieser Stein kann die Zellerneuerung aktivieren und ihm werden dadurch regenerative Eigenschaften nachgesagt.

INFO:

Sie müssen nicht exakt der Anordnung der Edelsteine auf der Matte liegen, da die Steine systemisch auf den Körper wirken. Sie können also punktuell darauf sitzen.

AUFBAU DER CADCEED EDELSTEINMATTE

Die CADCEED EDELSTEINMATTEN sind in mehreren Funktionsschichten aufgebaut.

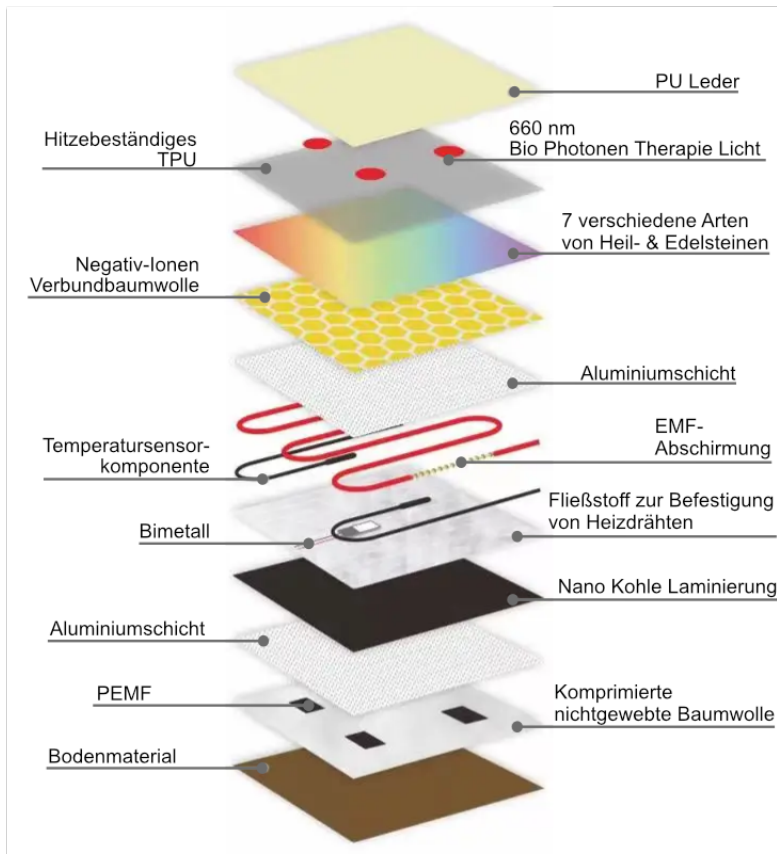

Die CADCEED EDELSTEINMATTEN werden mit mehreren Schichten hergestellt, um darin ein Gesundheitssystem zu etablieren.

Die Matte besitzt zudem eine **Abschirmung** von gesundheitsgefährdenden EMF (elektromagnetischen Feldern).

Die wichtigsten, natürlichen und heilsamen Elemente sowie Eigenschaften der Erde und der Sonne werden in der CADCEED EDELSTEINMATTE kombiniert:

- Magnetismus
- Licht
- Edelsteine / Heilsteine
- Berge
- Luft

Die CADCEED EDELSTEINMATTE bringt diese natürlichen gesunden Kräfte nach Zuhause. Diese Matte bietet eine wunderbare Möglichkeit einer Breitspektrum-Therapie für den Körper und Seele.

Genießen und spüren Sie die Kraft der Sonne, Erde und der anderen natürlichen Elementen.

- kurz zusammengefasst -

THERAPIEMÖGLICHKEITEN DER CADCEED EDELSTEINMATTE

NEGATIV IONEN THERAPIE

PHOTONEN ROTLICHT-THERAPIE


WÄRMETHERAPIE MIT FERNINFRAROTSTRAHLEN

MAGNETFELDTHERAPIE

EDELSTEINTHERAPIE

NEGATIV IONEN THERAPIE

(Negative Ionen, auch als Anionen oder Atome bekannt)

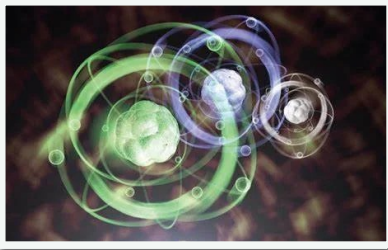

Jeder kennt es... das Wohlfühl im Wald, in den Bergen oder am Meer. Das kommt unter anderem durch den hohen Negativ-Ionen Gehalt in der Luft an.

In der CADCEED EDELSTEINMATTE werden zwei innovative Technologien zur Erzeugung negativer Ionen eingesetzt:

1. Negative-Ionen Gewebeschichten
2. Natürliche Kristalle / Edelsteine

Negative Ionen entstehen durch die Zusammenarbeit von den Edelsteinen und der Ferninfrarotstrahlen. Wenn die Wärme von der Matte die Kristalle erwärmt, erzeugen sie automatisch eine Fülle von Negativ-Ionen.


Für diese Therapie gibt es kein An / Aus-Knopf. Diese Negativ-Ionen Produktion läuft automatisch beim Anschalten der Matte.

PHOTON - ROTLICHT - THERAPIE

(das Rote Licht auf der Matte)

Laut NASA-Berichten vor über 40 Jahren und jüngsten klinischen Studien hat rotes Licht positive Ergebnisse für Hautverjüngung und Verschönerung, Kollagenproduktion, körperliche Leistungsfähigkeit und Muskelregeneration, Schlaf, Gelenkschmerzen, Entzündungen und so weiter.

Da es keine signifikanten Nebenwirkungen (ungiftig, nichtinvasiv und für alle Hauttypen als sicher) für den Körper hat, wird diese Therapieform gern im Krankenhaus, Schönheitssalons, Therapiezentren, SPA, Relax Studio, Zuhause usw. zur Verbesserung der Durchblutung, zur Heilung von Wunden und Hautproblemen eingesetzt.

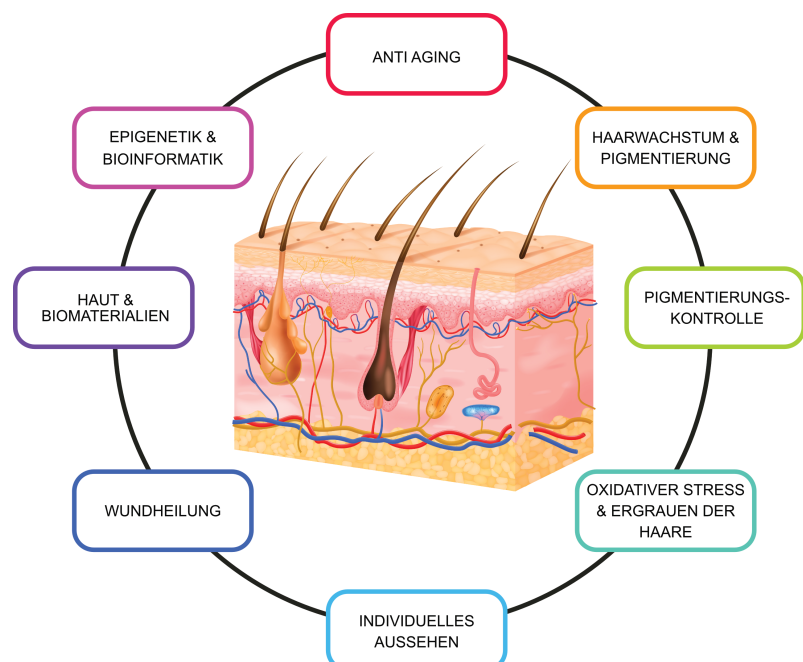

WÄRMETHERAPIE MIT FERNINFRAROTSTRAHLEN

WÄRMETHERAPIE ALLGEMEIN

Wirksamkeit der thermischen Therapie

Bei der thermischen Therapie wird die Körpertemperatur erhöht und somit die Gesundheit gefördert. Wärmetherapie ist die Behandlung des Körpers durch Wärme, auch heiße Saunagänge, Moxibustion und warme Bäder gehören dazu..

Beim Erwärmen des Körpers, also der Erhöhung der Körpertemperatur, werden die Zellen stimuliert und wird das „ thermisch aktivierte Protein“ produziert. Wenn thermisch aktivierte Proteine zunehmen, erhöht sich die Sekretion von Endorphinen und Immunzellen in unserem Körper markant. Die Wärmetherapie hat damit eine gesundende Wirkung auf unseren Körper.

INFRAROT – THERAPIE – BALSAM FÜR DEN KÖRPER

Industriestandards definieren Infrarotstrahlen als FIR, NIR und MIR.

Ferninfrarotstrahlen sind am weitesten vom sichtbaren Licht entfernt, und sind die für die tiefste Wärmeübertragung bekannt.

Die FIR (Ferninfrarotstrahlen) können den physischen Körper sowie den Geist sanft heilen, stimulieren und entgiften.


FIR-Wärme hilft, den Stoffwechsel anzukurbeln und das Nervensystem zu entspannen.

Diese Therapie bietet eine tiefe Muskel- und Gewebetherapie und damit verbundene Entspannungswirkung, während es die Durchblutung erhöht, Depressionen und Schmerzen reduziert.

Diese Schadstoffe werden durch Infrarot Tiefenwärme ebenfalls in Schwingung versetzt und gelockert.

Da sich durch die Infrarotwärme die Poren weiten und ein Schwitzprozess stattfindet, werden diese Schadstoffe in einem hohen Maß mit dem Schweiß ausgeschieden. Es findet also durch Infrarot Tiefenwärme auch eine Reinigung und Entgiftung statt.

Trinken Sie bitte ausreichend, um den Entgiftungsprozess zu unterstützen.

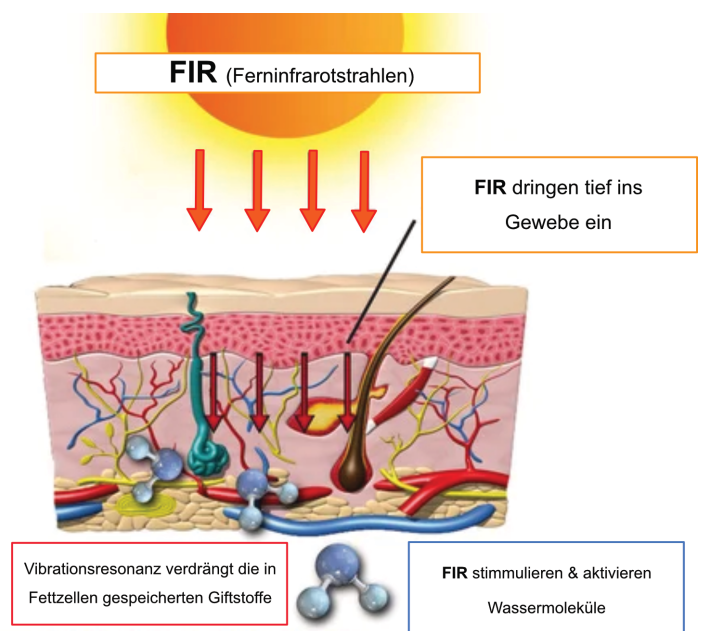

- Verbessert die Durchblutung und die Stoffwechselfunktion
- Reinigung des Körpers von schädlichen Giftstoffen

MAGNETFELD THERAPIE / BIO MAGNETISCHE RESONANZ THERAPIE

STÖRUNG DER NATÜRLICHEN BIORESONANZFELDER

Wir leben in einer Zeit, in der moderne Technologie uns mit, vom Menschen geschaffenen Wellenlängen umgibt, die die natürliche Frequenz der Erde stören. WLAN, Mobiltelefone, Sendemasten oder eine Vielzahl anderer elektronischer Geräte, gehören längst zu unserem Alltag. Die alles sind vom Menschen geschaffene Frequenzfelder, genannt Störfelder, denen wir uns nur ganz schwer oder meist garnicht entziehen können. Sie sind auch der Grund, warum unsere persönlichen Bioresonanzfelder häufig nicht im Gleichgewicht mit der elektromagnetischen Frequenz der Erde sind. Daraus können verschiedene gesundheitliche Probleme entstehen.

MAGNETFELDTHERAPIE

Gepulste elektromagnetische Feldtherapie (PEMFT oder PEMF–Therapie), auch bekannt als Niederfrequenz–Magnetstimulation (LFMS)

BRINGE KÖRPER, SEELE UND GEIST INS GLEICHGEWICHT

Die PEMF–Therapie ist eine der wenigen Modalitäten, die viele verschiedene gesundheitsbezogene Vorteile von Kopf bis Fuß bietet.



Die Pulsation bringt Bioresonanzenergie in den Körper.

Spezielle Kupferspulen leiten unsichtbare gepulste elektromagnetische Felder durch das Körpergewebe, um die Zellregeneration zu stimulieren.

PEMF–Geräte emittieren elektromagnetische Felder – biologisch identisch mit diesen Frequenzen, die von den Zellen, Organen, Knochen und Geweben des Körpers erzeugt werden.

SCHUMANN RESONANZ

Durch wissenschaftliche Experimente wurde gezeigt, dass die Synchronisierung mit der natürlichen Frequenz unseres Planeten (7,83 Hz = Schumann Resonanz) den Menschen zahlreiche Vorteile wie verbessertes Lernen/Gedächtnis, Zellerneuerung, energetisches Gleichgewicht, weniger Stress, Erdung und tiefe Entspannung bringen kann.

Die CADCEED EDELSTEINMATTE enthält 8 verschiedene Frequenzprogramme, inclusive der Schumannfrequenz (Programm 2). Ein neuntes Programm wechselt automatisch durch alle 8 Programme.

TIPP:

Die Wahl der passenden Frequenz: Fühlen Sie in sich hinein.

Können Sie sich nicht entscheiden? Dann wählen sie Programm 2 und lassen sich erden.

EDELSTEIN / HEILSTEIN-THERAPIE

Alles schwingt.

Selbst die feste Materie, wie die Edelsteine, die sich für unsere Sinne regungslos zeigt, besitzt ihre eigene sehr langsame Schwingung.

Edelsteine, auch als Heilsteine bezeichnet, haben mit ihren eigenen spezifischen Schwingungen großen Einfluss auf Bereiche des geistigen und körperlichen Wohlbefindens, einschließlich der Gefühle.



Die Vielfalt der Edelsteine

Edel- und Heilsteine bestechen zu allererst durch ihre meist ganz typische Farbe.

Sie können blau, türkis, grün, gelb, orange, rosa, rot, violett, weiß, schwarz oder mehrfarbig sein.

Wie können Edelsteine helfen?

Heilsteine können Widerstände im Energiefluss lösen und sich positiv auf unsere mentale und körperliche Gesundheit auswirken, indem sie die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktivieren. Jeder Heilkristall / Edelstein hat einzigartige Energien und Frequenzen und damit seine ganz eigene Wirkung.

Edelsteine können z.B.:

- Ruhe und Ausgeglichenheit fördern
- Positivität steigern
- Blockaden, Anspannungen, Depressionen & Ängste lösen
- Konzentration steigern
- Immunität verbessern
- Schmerzen natürlich lindern
- Selbstvertrauen steigern
- Mut und Entschlossenheit fördern
- und vieles mehr.....

In der CADCEED EDELSTEINMATTE sind ausgewählte Edelsteine enthalten, die außerdem den Chakren zugeordnet sind.



INBETRIEBNAHME / STROMANSCHLUSS

Auch beim Stromanschluss kann man die feine Elektronik in der Bedieneinheit schonen. (Das Prinzip trifft übrigens auf alle Geräte , die eine Zwischeneinheit besitzen, zu)

Wenn sie die Matte in Betrieb nehmen wollen:

1. erst die Verbindung von Bedieneinheit und Matte herstellen
2. den Stecker in die Steckdose stecken
3. Bedieneinheit anschalten

Beim Trennen der Stromverbindung:

1. Bedieneinheit abschalten
2. Stecker aus der Steckdose ziehen
3. Matte von der Bedieneinheit trennen

PLEGEANLEITUNG

Um lange Freude an der CADCEED EDELSTEINMATTE zu haben, gibt es hier einige Tipps zur Pflege.

Bitte schützen Sie die Matte und das Bedienteil vor eindringenden Wasser!

BENUTZUNG & SCHUTZ DER MATTE

Wir empfehlen das Material und die Edelsteine vor unnötiger Verunreinigung zu schützen.

Legen Sie während der Benutzung immer ein Handtuch unter – optimal wäre ein weißes Handtuch, damit die FIR / Rotlicht ordentlich im Körper ankommt.

Um die Steine / Matte vor Schweiß zu schützen, z.B. wenn sie die höheren Temperaturen verwenden, können Sie auch ein wasserundurchlässiges Laken, ebenfalls in Weiß verwenden.

TIPP:

So wenig Anziehsachen wie möglich – auch keine Dunklen.... (In der Sauna hat man ja auch nix an!)

TIERE IM HAUSHALT

Tiere im Haushalt legen sich besonders gern auf die Matten, auch wenn diese ausgeschaltet sind, da sie die positiven Energien z. Bsp. der Steine spüren. Sie legen sich auch drauf, wenn die Matten zusammengefaltet sind!

Schützen Sie die Matte, indem Sie eine Decke drüber legen oder die Matte wegräumen.



PFLEGE DER EDELSTEINE

Auch Edelsteine wollen gepflegt werden.

NUR bei Bedarf: Am besten wischen Sie mit einem sehr leicht feuchten Baumwolltuch über die Matte – bitte nur frisches – nach Möglichkeit gefiltertes – Wasser **OHNE Zusätze** verwenden!

Machen Sie die Matte ca. 1 x im Monat für eine halbe Stunde (bei 3–4 Benutzungen / Woche) mit allen Funktionen an. Nutzen Sie dabei ca. 50 C°. Stellen Sie dabei das Programm 2 (Schumann Resonanz) an. Die Matte reinigt sich dabei selbst von schlechten Energien. Lüften Sie dabei nach Möglichkeit kurz durch.

Bitte legen Sie sich während eines Mattenreinigungsprozesses NICHT auf die Matte.

TIPP ZUR RAUMREINIGUNG

Sie können so auch die Matte nutzen, um Ihr Raum mit Negativ-Ionen zu fluten. Am besten dafür die Matte auf ca. 30 C° heizen.

Auch die Schumannfrequenz (Programm 2) kann den Raum zusätzlich in Einklang bringen.

Zur Pflege des Leders benutzen Sie bitte nur sanftes Pflegemittel oder Wasser ohne Zusätze. Das Leder können sie auch mit Lederpflege behandeln.



INFORMATIONEN

LIEFERUMFANG

- CADCEED EDELSTEINMATTE
- Tragetasche
- Bedieneinheit incl. Netzstecker
- 1X TENS PADS incl. Anschlusskabel
- 1x Magnetfeldtester (Mit dem Magnetfeldtester können Sie an bestimmten Stellen der Matte das Energiefeld wahrnehmen.)
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Produktmaße:	80 x 190cm
Gewicht:	18 Kilogramm
Material:	Kunstleder & div. Andere – Siehe Aufbau
Steine:	Roter Jaspis, Carneol, gelbes Aventurin, grünes Aventurin, blauer Chalcedon, Sodalith, Amethyst, Bian Steine
Power:	110V~120V, 60Hz/220V~240V, 50Hz, 280Watt
Temperaturbereich:	30~70°C
Steckdosen–Stecker:	Typ–C (Eurostecker)
	ISO Standard, CE

LINKS

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf
www.cadceed.de



BEDIENUNGSANLEITUNGEN ALS PDF–DATEI:
<https://www.cadceed.de/Downloads/bedienungsanleitungen.html>



Quellen Bilder:
– freepik.com/Bild von macrovector
– PIXABAY